



C.T.M. PROMENADSKOTER

HS-925 Bruksanvisning SV 1.2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01. INLEDNING	1
02. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	2
2-1 FÖRE KÖRNING AV SKOTERN	2
2-2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER KÖRNING	3
2-3 ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION FÖR PROMENADSKOTERN	4
2-4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID KÖRNING UTFÖR	4
2-5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID KÖRNING UPPFÖR	5
2-6 ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS OCH VARNINGAR	5
2-7 SÄKERHETSVARNINGAR & ETIKETTER	7
03. INGÅENDE DELAR	8
04. BESKRIVNING & FUNKTIONER FÖR KONTROLLPANELEN	9
4-1 BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN	9
4-2 FUNKTIONER FÖR KONTROLLPANELEN	10
05. SÅ HÄR FUNGERAR DIN PROMENADSKOTER.....	12
5-1 HANDHAVANDE	12
5-2 FRIHJUL (N-D-SPAK)	15
5-3 KONTROLLSYSTEM FÖR SÄKER FART	15
5-4 FASTA KROKAR	16
5-5 DEMONTERING AV PROMENADSKOTERN	16
06. BATTERILADDNING	18
6-1 HANTERING AV LADDAREN	18
6-2 BATTERI & LADDARE	19
07. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	20
7-1 DAGLIG KONTROLL	20
7-2 VECKOKONTROLL	20
7-3 MÅNADSKONTROLL	20
7-4 RENGÖRING AV PROMENADSKOTERN	22
7-5 UNDERHÅLL	22
08. ÖVRIG INFORMATION.....	23
8-1 ÅTERVINNING & BORTSKAFFNING	23
8-2 LIVSLÄNGD	23
09. FELSÖKNING.....	23
9-1 SKOTERN RÖR SIG INTE NÄR NYCKELN VRIDS OM	23
9-2 FELKOD	24
9-3 ANDRA PROBLEM	24
10. TILLVAL	25
11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	26
12. Service	27
13. GARANTIVILLKOR	29

1. INLEDNING

Grattis till ditt köp av din nya promenadskoter från C.T.M. Den har utformats för att ge dig större rörelsefrihet, både inomhus och utomhus.

Vår ambition är att tillhandahålla säkra och bekväma produkter som våra kunder är helt nöjda med. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta din promenadskoter från C.T.M.

Läs igenom och iaktta alla varningar och anvisningar i bruksanvisningen innan du tar promenadskotern i bruk. Behåll bruksanvisningen för framtida referens.

I händelse av att du råkar ut för ett allvarligt tillbud med produkten bör du kontakta tillverkaren samt den behöriga myndigheten i ditt land.

Kontakta oss gärna om du har frågor:



CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.

No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District, New Taipei City, Taiwan

Tel: +886-2-2903-2987 Fax: +886-2-2903-8807

E-post: sales@chienti.com.tw <http://www.chienti.com.tw>

Information om europeisk representant:



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Svensk generalagent:

Dealy Sweden AB

Box 57

75103 Uppsala

018-170590

info@dealy.se

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2-1 FÖRE KÖRNING AV SKOTERN

- Innan du använder promenadskotern för första gången bör du bekanta dig med dess funktioner och delar. Läs denna bruksanvisning.
- Säkerställ att skotern är i kördugligt skick och att du är på det klara med hur den fungerar.
- Du får inte montera, underhålla eller använda promenadskotern innan du har läst denna bruksanvisning.
- Iaktta och följ allmänna trafikregler där du kör.
- Skotern får bara användas på sådana vägar som den är godkänd för i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
- Ge alltid akt på fotgängare och situationer som kan kräva extra uppmärksamhet när du kör på trottoarer och gångvägar.
- Kör inte skotern om du är påverkad av alkohol eller läkemedel som kan försämra din körförmåga.
- Kör inte promenadskotern när det är mörkt ute.
- Vrid om tändningsnyckeln innan du kliver på eller av (se punkt 5-1 Handhavande).



Följ alltid tillämpliga regler för fotgängare och trafikanter på allmän väg när du kör promenadskotern.



- Starta inte promenadskotern förrän du satt dig och spänt fast säkerhetsbältet (om så utrustad).
- Skotern ska vara avstängd när du kliver av eller på. Detta minimerar risken för att du oavsiktligt kommer åt gas-reglagen vilket kan orsaka skada.
- Kroppsvikten ska vara centrerad. Sitt inte för långt ut på kanten då det gör promenadskotern instabil.
- Endast en person i taget får använda promenadskotern. Passagerare får under inga omständigheter åka med.

•Tips

- Om du inte kört en promenadskoter tidigare är det lämpligt att öva på ett rent och säkert ställe med jämnt underlag (t.ex. en park eller lekplats).
- Övningar: Trycka in och släppa gas-reglagen/Stanna/Backa/Svänga/Köra upp på ramp.
- Ställ in fartvredet på lägsta fart och öka långsamt farten när du bekantat dig med skotern. (se punkt 4-2 Funktioner för kontrollpanelen – Fartvred)



Öva på att köra din promenadskoter i sällskap med någon som kan assistera dig. Kom ihåg att övning ger färdighet! Öva på dessa grundläggande funktioner tills du känner att du har kontroll över din promenadskoter.

2-2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID KÖRNING

- Kontrollera alltid promenadskotern före varje användningstillfälle. (se punkt 7-1 Daglig kontroll).
- Sträck dig inte ut på skotern.
- Kontrollera noga innan du kör över järnvägs korsningar.
- Använd inte mobiltelefon eller trådlösa enheter. (Se punkt 2-6 EMI och varningar)
- Använd inte promenadskoterns batterier för att ladda andra elektriska enheter, med undantag av tillbehör från originaltillverkaren.
- Kör inte i backar som överskrider angiven lutningsvinkel. (Se punkt 11 Teknisk specifikation max. höjd trottoarkant)
- Kör inte över hinder som överskrider angiven gräns. Passera istället bredvid. (Se punkt 2-5 Försiktighetsåtgärder vid körning uppför)
- Använd inte skotern under osäkra vägförhållanden. Om du ändå måste använda den, kör då skotern i sällskap med någon som kan assistera dig:
 - Mörker, dåligt väder såsom regn, snö, dimma, storm och dålig sikt.
 - Smala stigar, järnvägs korsningar och ojämn terräng.
 - Vått gräs, sand, grus eller andra potentiellt farliga förhållanden.
- Lamporna på promenadskotern ska vara tända vid körning på natten eller när sikten är dålig.
- Stanna promenadskotern om batterierna har laddat ur då fortsatt användning kan skada skotern.
- Luta dig framåt när du kör uppför ramper, trottoarkanter, sluttningar eller upphöjningar. (se följande bild)



På jämn väg




I backe



- Följ alltid lokala trafikregler för fotgängare vid körning utomhus.
- Sänk farten när du ska svänga och ha kroppsvikten centrerad. Detta minskar avsevärt risken för att skotern ska tippa och välta.



- Sänk farten vid körning uppför för att förebygga fara. Öka hastigheten i motlut (se punkt 4-2 Funktioner för kontrollpanelen – Fartvred)
- Stäng inte av strömmen under körning.
- Försök inte köra över ett hinder som är orimligt högt vid körning uppför eller utför. Detta kan få promenadskotern att välta.
- Använd inte promenadskotern i hiss.
- Gör inga skarpa svängar under körning. Detta kan få promenadskotern att välta.
- Placera aldrig promenadskotern i frihjulsläge när du befinner dig i uppförs- eller nedförsbacke. När skotern parkeras ska växelspaken låsas i läge D (Drive). (Se punkt 5-2 Frihjul (N-D-spak))
- Vid järnvägsövergångar ska hjulen hållas i 90 graders vinkel mot spåren för att inte fastna i dem.

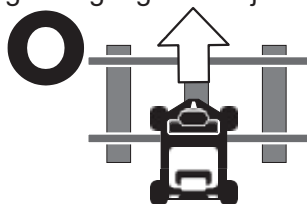

- Kör så sakta som möjligt i nedförsbackar. Släpp gasreglaget för att stoppa promenadskotern om det går fortare utför än du vill. Tryck försiktigt in gasreglaget för att kontrollera farten.

2-3 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PROMENADSKOTERN


- Batterierna ska vara helt laddade före användning för maximal prestanda och livslängd. (Se punkt 6-1 Hantering av laddaren)
- Max. lasten för promenadskotern är 136 kg. Överskrid inte högsta tillåtna belastning. Om max. vikten överskrids kan du skada dig.
- Promenadskotern är endast avsedd för användning av en person vars vikt inte överskrider högsta tillåtna belastning av enheten. Använd aldrig enheten för att transportera mer än en person (inklusive barn).
- Ge dig inte på underhållsarbeten som inte är beskrivna i denna bruksanvisning.
- Inga delar får ändras, modifieras eller tas bort, i synnerhet inte säkerhetsdelar såsom tippskydd.
- Släpp ut luften ur däck helt (luftfyllda däck) före demontering och borttagning av fälgen.



- Skotern och dess delar är brandsäkra.
- Utsätt om möjligt inte skotern för regn, snö, is, salt eller vattenansamlingar. Underhåll och förvara promenadskotern på ett rent och torrt ställe. Direkt kontakt med vatten kan skada skotern och dess elektriska komponenter, eller orsaka rostskador på ramen.
- Ta inte bort tippskydden eller modifiera din skoter på icke tillåtet sätt.
- Använd bara laddare, tillbehör eller komponenter i originalutförande från leverantören av promenadskotern.
- Stanna skotern omedelbart om du upplever problem med den. Stäng av strömmen och kontakta återförsäljaren för ytterligare kontroll.
- Iaktta försiktighet när du kör skotern då du kanske måste göra plötsliga inbromsningar.

2.4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID KÖRNING UTFÖR

- Skotern har max. gränser för klättringshöjd, höjd på hinder och mellanrum. (Se punkt 2-5 Försiktighetsåtgärder vid körning uppför samt 11 Tekniska specifikationer)
- Kör aldrig i sluttningar som överskrider angiven gräns.
- Viktförflyttande kapacitet vid olika lutningsgrader (se följande bild).

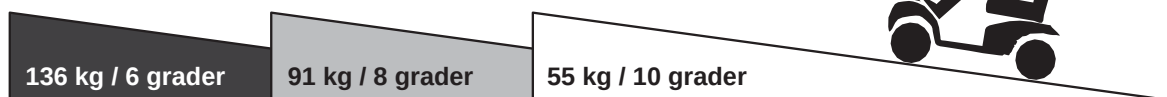

- Promenadskoterns kapacitet i motlut påverkas av din vikt, hur fort du kör, skoterns vinkel när du närmar dig motlutet och dess inställningar.
- Kör inte på långa ramper eller på ojämnt underlag för att förebygga risk för skador på motorn.
- Batterispänningen ökar som regel vid körning uppför. Om batterispänningen blir för hög aktiveras överspänningsskyddet och minskar farten tills skotern stannar. (felkod ERR3 visas) Kör till ett säkert ställe, släpp gas-reglagen och starta om promenadskotern.



- Vid körning nedför ramp eller på ojämnt underlag ska lägsta fart ställas in för att garantera kontrollerad körning.
 - Släpp gasreglaget om farten är för hög och stanna skotern. När du känner att du har kontroll över skotern för du reglaget framåt igen och fortsätter att köra framåt.
- Vänd inte i hög fart när du kör uppför eller nedför en ramp.

2-5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID KÖRNING UPPFÖR


• Promenadskotern klarar att köra över hinder och trottoarkanter som är max. 10 cm höga (A).

Promenadskotern klarar att köra över mellanrum på 15 cm (B).

Kör alltid rakt på eventuella hinder utan att stanna på halva vägen!

Kontrollera att framhjulen på promenadskotern är i rätt vinkel mot hindret. Närma dig hindret sakta tills framhjulen kommer i kontakt med hindret. Öka sedan farten och kör över hindret med bägge hjulen utan att stanna på halva vägen. Därefter kan du sänka farten.

• Justera kroppsvikten vid körning uppför ramp för ökad stabilitet.

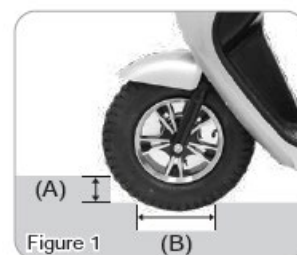

Försök aldrig ta dig över ett hinder när du kör i motlut eller utför backe eftersom det ökar risken för att välta!

Ställ ryggstödet i en upprätt position innan du kör över ett hinder för att förhindra att promenadskotern välter.

2-6 ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS OCH VARNINGAR



Det är mycket viktigt att du läser informationen i denna bruksanvisning om eventuell påverkan av elektromagnetisk interferens på din promenadskoter.

Elektriska rullstolar och promenadskotrar kan utsättas för elektromagnetisk interferens (EMI) det vill säga elektromagnetisk energi (EM) från källor som radio- och TV-stationer, amatörradioutrustning, (HAM), tvåvägsradioapparater och mobiltelefoner. Interferens (från radiovågskällor) kan leda till att promenadskoterns bromsar släpper, att den börjar rulla av sig själv eller köra åt ett annat håll än föraren anger. Promenadskoterns kontrollsystem kan också skadas permanent. Intensiteten för den elektromagnetiska strålningen kan mätas i volt per meter (V/m). Promenadskotern står emot elektromagnetisk interferens upp till en viss intensitet. Detta kallas "immunitetsnivå". Ju högre immunitetsnivå desto starkare skydd. Med dagens teknik kan man uppnå en immunitetsnivå på minst 20 V/m, vilket skyddar mot vanligt förekommande källor till elektromagnetisk interferens. Immunitetsnivån för denna promenadskoter är 20 V/m.

Det finns ett antal källor till relativt intensiva elektromagnetiska fält i vår vardagsmiljö. Vissa sådana källor är självklara och enkla att undvika. Andra är inte lika uppenbara och exponering är oundviklig. Genom att ge akt på varningarna nedan kan riskerna för elektromagnetisk interferens minimeras.

Källor till elektromagnetisk interferens kan delas in i tre kategorier:

1. Handhållna bärbara sändtagare (sändare-mottagare) med antennen monterad direkt på sändaren. Exempel på sådana är: privatradioutrustning (CB), "walkie-talkies", säkerhets-, brand- och polisradio, mobiltelefoner och annan personlig kommunikationsutrustning.



Vissa mobiltelefoner och liknande enheter kan överföra signaler när de är påslagna, även när de inte används.

2. Mellandistanssändare som används i t.ex. polisbilar, brandbilar, ambulanser och taxibilar. För sådana är antennen som regel monterad på utsidan av fordonet.
3. Långdistanssändare och -sändtagare såsom kommersiella radio- och TV-antenntorn samt amatörradioutrustning (HAM).



Andra typer av handhållna enheter, såsom trådlösa telefoner, bärbara datorer, AM/FM-radioapparater, TV-apparater, CD-spelare, kassetbandspelare och mindre apparater som rakapparater och hårtorkar, avger ingen elektromagnetisk energi som kan orsaka problem med din promenadskoter.

Elektromagnetisk interferens på promenadskotern:

Eftersom elektromagnetisk energi blir allt starkare ju närmare man kommer sändningsantennen (källan) kan elektromagnetiska fält från handhållna radiovågskällor (sändtagare) orsaka problem. När man använder sådan apparatur är det möjligt att oavsiktligt föra höga nivåer av EM mycket nära promenadskotern. Detta kan påverka promenadskoterns rörelser och bromsfunktion. Iakttag därför varningarna nedan för att motverka potentiell interferens med promenadskoterns styrsystem.

Varningar:

Elektromagnetisk interferens (EMI) från källor som radio- och TV-stationer, amatörradioutrustning (HAM), tvåvägsradio och mobiltelefoner kan påverka promenadskotern. Följ varningarna nedan för att minska risken för att oavsiktligen koppla ur promenadskoterns broms eller sätta den i rörelse då detta kan orsaka allvarlig skada.

1. Använd inga handhållna sändtagare (sändare-mottagare) som privatradioutrustning eller personliga kommunikationsenheter som t.ex. mobiltelefon när promenadskotern är igång.
2. Ha koll på närliggande sändare, som t.ex. radio eller TV-stationer, och försök undvika att komma nära dem;
3. Om promenadskotern oavsiktligen sätts i rörelse eller bromsen kopplas ur ska den stängas av så snart det är säkert.
4. Tänk på att anslutning av tillbehör och komponenter eller modifieringar av promenadskotern kan göra den känsligare för elektromagnetisk interferens.



Det finns inget enkelt sätt att utvärdera hur dessa inverkar på promenadskoterns övergripande immunitet.

5. Rapportera alltid oavsiktlig aktivering av promenadskotern eller urkoppling av bromsen till distributören. Kontaktuppgifter finns på försättsbladet i denna bruksanvisning. Ange även förekomst av närliggande källa till elektromagnetisk interferens.

Viktig information:

1. 20 volt per meter (V/m) är en generellt uppnåbar och lämplig immunitetsnivå mot elektromagnetisk interferens (per maj 1994). Ju högre nivå desto starkare skydd.
2. Immunitetsnivån för denna produkt är 20 V/m.

2-7 SÄKERHETSVARNINGAR & ETIKETTER

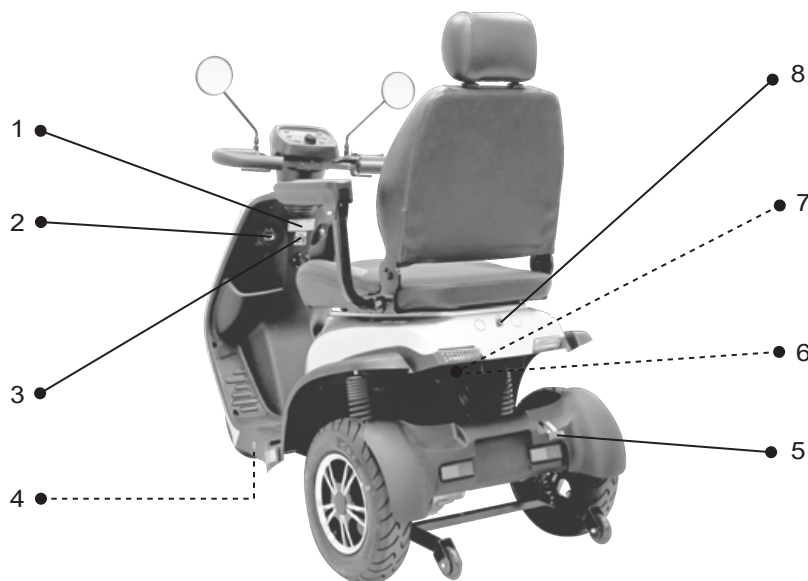
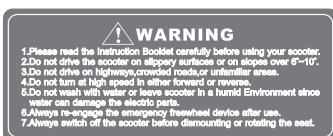


Figure 2

①

Varningsetikett

1. Läs manualen noga innan du tar din promenadskoter i bruk.
2. Kör inte skotern på halt underlag eller i backar med över 6-10graders lutning
3. Kör inte på motorvägar eller hårt trafikerade vägar, eller på platser som du inte är bekant med.
4. Sväng inte i hög fart varken vid körning framåt eller bakåt.
5. Tvätta inte skotern med vatten eller lämna den i fuktiga miljöer eftersom vatten kan skada dess elektroniska komponenter
6. Koppla alltid in det nödutlösta frihjulet igen efter användning.
7. Stäng alltid av av skotern innan du kliver av eller roterar sätet.

②



Laddningsportens etikett

③



Varningsetikett om bogsering
Får inte bogseras av något fordon

④



Förankringsöglor på promenadskotern.
Uppehåll dig inte på skotern under transport


⑤



N-D-spak (neutral-drive) som anger frihjulsdrift
(Se punkt 5-2 Frihjul (N-D-spak))

N-D-spak (neutral-drive) som anger frihjulsdrift
(Se punkt 5-2 Frihjul (N-D-spak))

⑥

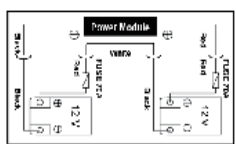

Kopplingsschema

⑦



SN Serie Nummer

REF Modell Nummer

Tillverkningsår

Tillverkare

Varning

WEEE Direktivet

EC REP EU Europeisk representant

MD Medicintekniskt godkänd

CE CE-märkning

Läs bruksanvisning

Max: Maxi vikt kapacitet

⑧ Varningsetikett Akta händer




3.INGÅENDE DELAR

Innan du börjar använda promenadskotern på egen hand är det viktigt att du bekantar dig med kontrollerna och hur du hanterar dem på ett säkert sätt.


Avsedd användning : C.T.M. Mobility Scooters tillhandahåller ett sätt med vilket en funktionshindrad passagerare dvs. en funktionshindrad person eller en person som inte har full kapacitet att gå utan hjälp för att ha rörlighet och frihet att resa.

Indikation : Åkande är en person som behöver en skoter på grund av nuvarande eller förväntade begränsningar av rörligheten. C.T.M. Mobility Scooters är avsedda att vara tillämpliga på minst 50% av vuxna användare, baserat på kroppsstorleken hos vuxna användare inom intervallet 50: e percentilen vuxna kvinnor till 50: e percentilen vuxna män förmågan och med olika vikt.

Kontraindikationer : Inga.

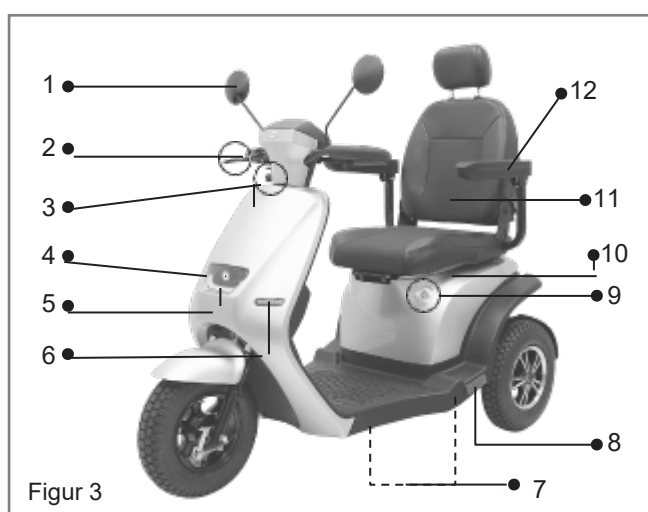

Figur 3

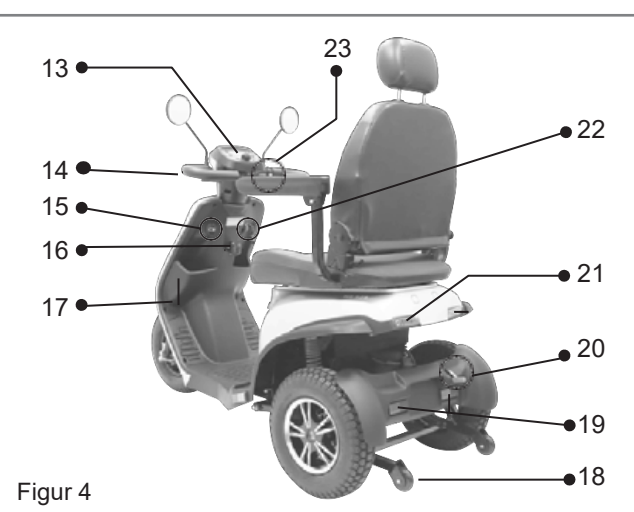

Figur 4

NR	DEL	NR	DEL
01	Backspegel	15	Laddningsuttag
02	Nödhandbroms	16	Krok för väska (Max. belastning: 1 kg)
03	Inställning av styrstångsvinkel		
04	Strålkastare	17	Förvaringsutrymme
05	Daytime ljus	18	Tippskydd
06	Främre riktningsvisare/varningsblinkers	19	Reflex baktill
07	Förankringsöglor	20	N-D-spak
08	Sidoreflex	21	Bromsljus: Stadigt lysande rött ljus/sken/// i fem sekunder Varningsblinkers: Blinkande ljus Bakre riktningsvisare: Vänster/höger ljus blinkar
09	Vrede till förvaringsutrymme under sätet		
10	Förvaringsutrymme under sätet (Max. belastning: 2 kg)		
11	Säte		
12	Armstöd	22	Tändningsnyckel
13	Kontrollpanel	23	Gasreglage
14	Styre		

*Ovan är endast för referens.

4.BESKRIVNING & KONTROLLPANELEN

4-1 BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN



Figur 5 - HS-925 Kontrollpanel

Knappbenämning		Funktion
	Varningslampa	Tryck på varningslampan en gång för att sätta på och sedan en gång till för att stänga av.
H/L	Hög/låg fart	Tryck på H/L-knappen en gång för att växla mellan hög och låg fart. (Hög/låg fart varierar beroende på aktuell fartinställning.)
	Vänster blinker	Tryck på blinkern en gång för att sätta på den och en gång till för att stänga av den (stänger av sig automatiskt efter 30 sekunder).
	Höger blinker	Tryck på blinkern en gång för att sätta på den och en gång till för att stänga av den (stänger av sig automatiskt efter 30 sekunder).
	Signalhorn	Tryck på signalhornet en gång för att avge en kort varningssignal. Håll knappen nedtryckt för att avge en längre varningssignal till dess knappen släpps upp.
	Knapp för strålkastare	Tryck på knappen för strålkastare för att sätta på fram- och baklyktan.
	Fartvred	Vrid mot "kaninen" för att öka farten; vrid mot "sköldpaddan" för att sänka farten.

LED-lampa på kontrollpanelen:

·Hastighetsmätare:

Orange lampa lyser när [H/L] är inställd på "L".

·Vänster/höger blinker: Grön lampa

·Strålkastare: Grön lampa

·Varningsblinkers:

Slå på skotern och grön lampa lyser. Lampan blinkar om ett fel har uppstått. (se punkt 9-2 Felkod).



Figur 6

4-2 FUNKTIONER FÖR KONTROLLPANELEN


·När skotern startas

visas startskärmen på displayen.

Strålkastare

Vänstersväng

Vägmätare

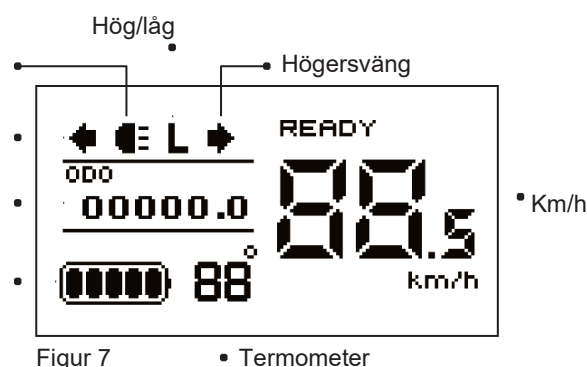Batteri-
mätare

Figur 7

Strålkastare fram / Daytime belysning (tillval, se punkt 9):

·Daytime belysning slås på automatiskt när promenadskotern slås på.

·Tryck på strålkastarknappen [☛] en gång för att stänga av daytime belysning och växla till strålkastare.

LED-lampan för strålkastare lyser upp och displayen visar [☛]

·Tryck på [☛] igen för att stänga av strålkastaren/LED-lampan/displayen och slå på daytime belysning.

Blinker och varningsblinkers:

·Tryck på knappen [◀] för att slå på vänster blinker som blinkar och avger ett synkroniserat pip ljud.

Lampan [◀] på panelen börjar blinka. Tryck på knappen igen för att stänga av vänster blinker.

·Tryck på knappen [▶] för att slå på höger blinker som blinkar och avger ett synkroniserat pip ljud.

Lampan [▶] på panelen börjar blinka. Tryck på knappen igen för att stänga av höger blinker.

·Blinkern stänger automatiskt av sig själv efter 30 sekunder (med undantag för varningsblinkers).

Om blinkern stängs av under sväng kan du trycka på knappen för att slå på den igen.

·Tryck på knappen [⚠] för att slå på vänster och höger blinker som då samtidigt blinkar och piper.


Lamporna [◀] och [▶] på panelen kommer att slås på och blinka samtidigt. Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen.

·När varningsblinkers är på fortsätter lamporna och displayen att blinka om skotern stängs av eller går in i strömsparläge. Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen.

Fartvred

Kaninsymbolen anger snabb fart och sköldpaddssymbolen långsam fart.

·Med fartvredet kan du ställa in farten för din promenadskoter. (Figur 8)

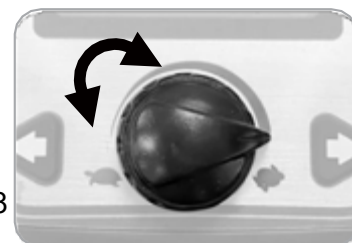

Figur 8



Ställ inte in farten på max vid start av skotern. Kör fort när du närmar dig en uppförsbacke och ställ in lägsta fart i nedförsbacke.

Batterimätare:

• När promenadskotern används minskar batterinivån kontinuerligt.

Statusvisning					
Kapacitet (%)	>80	<80	<55	<35	<20


Figur 9

Varning – låg batterinivå:

- Varningsförhållande: Varning om låg batterinivå aktiveras när batterinivån understiger 25 % av sin max. kapacitet.
- Varningsljud: Pip-pip-pip
- Ladda batterierna omgående när den röda lampan blinkar eftersom restströmmen bara räcker i högst tre kilometer.

Batteriladdningsstatus:

- Laddningsstatusen visas på displayen med batterinivån blinkande under laddning.
(Skotern kan inte användas när den laddas.)
- Så länge som laddaren är ansluten till laddningsuttaget visas laddningsindikatorn på displayen.

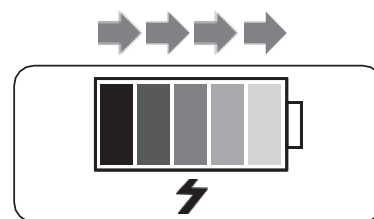

Figur 10

Se indikatorerna på batteriladdaren för mer ingående laddningsstatus.

- Om ingen knapptryckning sker inom tio sekunder stängs displayens bakgrundsbelysning automatiskt av. Tryck på valfri knapp för att aktivera bakgrundsbelysningen.

H / L-knapp:

- Om skotern körs i låg fart visas [L] på displayen. Lysdioden är orange.
- Om skotern körs i hög fart visas [H] på displayen.

Fart:

- Fartintervall: 0,5~30,0
- Visad enhet///: "km/h", farten anges i kilometer per timme.



Figur 11

Vägmätare:

- Vägmätarens intervall: 0~99999,9 km

- Vägmätaren nollställs automatiskt när den totala körsträckan uppnått 99 999,9 km.

Temperatur:

- Temperaturintervall: Celsius -20~50°C eller Fahrenheit -4~122°F (+- 2° skillnad)

5.SÅ HÄR FUNGERAR DIN PROMENADSKOTER

5-1 HANDHAVANDE

Tändningsnyckel:

- Vrid nyckeln till höger - Promenadskotern slås på.
- Vrid nyckeln till vänster - Promenadskotern stängs av.
- Slå på promenadskotern, kontrollpanelen är i standbyläge. (C)



- Kontrollera alltid att promenadskotern är avstängd (OFF) innan du kliver på/av eller avlägsnar något från den.
- Om promenadskotern stängs av (OFF) under körning stannar den tvärt vilket kan ge upphov till fara.



Figur 12

Strömsparläge:


- Skotern går in i strömsparläge efter en lång varningssignal om gasreglaget inte tryckts in inom en förprogrammerad tid. (Förprogrammerad tid är 10 minuter.)
- När promenadskotern är i strömsparläge slocknar displayen automatiskt och skotern svarar inte på kommandon.
- Avbryt strömsparläget genom att vrida tändningsnyckeln till läge off och sedan tillbaka till läge on.

Gasreglage:

- Tryck in höger gasreglage (A) för att köra skotern framåt. Tryck in vänster gasreglage (B) för att backa skotern. Dessa kan spegelvändas om så önskas. Kontakta lokal återförsäljare. (Figur 13)
- Gasreglaget används även för att accelerera. Ju mer du trycker in reglagen desto fortare går det (beroende på läge för fartvredet.)
- Om du släpper både vänster och höger gasreglage aktiveras bromsarna automatiskt så att promenadskotern saktar in och stannar. Bromsljusen aktiveras och lyser stadigt med rött sken under 5 sekunder. (se punkt 3 Ingående delar)

Broms:

- Släpp gasreglaget, skotern stannar automatiskt efter att den rullat en kort sträcka.
- Använd vid behov handbromsen för att stanna skotern. (Figur 14)

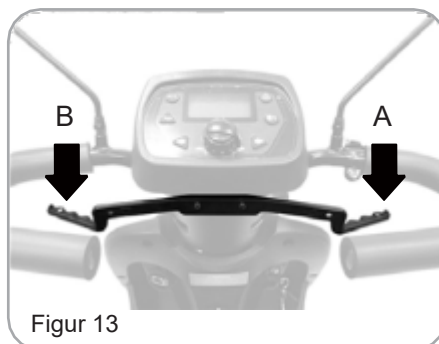

Figur 13



Figur 14


Inställning av styrstångsvinkel

- Dra upp styrstångsspaken för att ställa in styrstången i tre olika vinklar och släpp den sedan för att låsa den i önskad position. (Figur 15)



Tryck inte på höger och vänster gasreglage samtidigt eftersom du kan tappa kontrollen över promenadskotern.


- Kontrollera omgivningarna innan du backar, för att förhindra olyckor.
- Justera inte styrstångsspaken under körning.
- Sitt ned på skotern. Stå inte på fotplattan under körning.

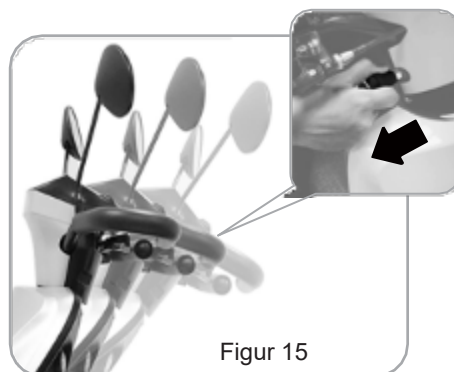

Figur 15

Inställning av armstöd

- Vinkel: Ställ in armstödet vinkel med hjälp av justerskruven. Dra upp armstödet när du kliver på eller av promenadskotern. (Figur 16)

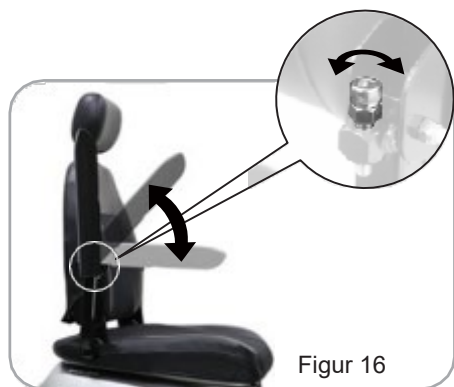


Figur 16

Justering av sätet i längsled :


- För spaken uppåt för att ställa in sätet i en bekväm position. (Figur 17)

Inställning av ryggstöd med packbox (Tillval, se punkt 9) :

- För spaken uppåt för att ställa in sätet i en bekväm position. (Figur 18)

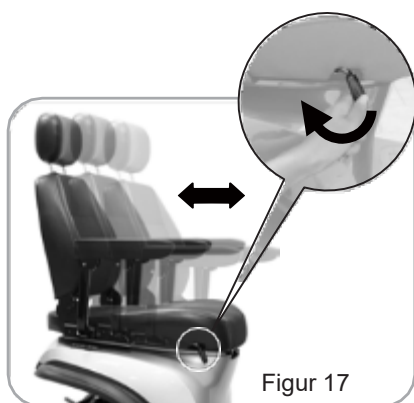

Figur 17

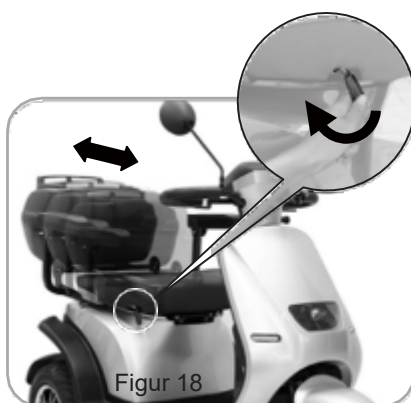

Figur 18

Förvaringsutrymme under sätet

·Upplåsning:

Fäll upp armstödet (Figur 20) Vrid av tändningen och ta ur tändningsnyckeln. (se punkt 5-1 Handhavande).

Sätt i nyckeln i nyckelhålet under sätet. Vrid nyckeln medsols för att öppna förvaringsutrymmet. (Figur 21)
Samtidigt som du lyfter sätet lite med andra handen. Ta tag i nackstödet och fäll upp sätet helt (Figur 22).

·Låsning:

Fäll ned sätet varsamt med båda händerna (Figur 22) för att stänga. Tryck till i sätet så att det klickar till (Figur 23).

·Lämna inga ägodelar i förvaringsutrymmet.

·Ställ in sätet i den bekvämaste positionen före varje körning. Justera inte sätet under körning.
Ställ in stolen i främre läget under körning för att förhindra att skotern tippar. Häng inte tunga saker på armstöden.

·Tänk på att sätet är tungt, man öppnar förvaringsutrymmet bör man iaktta försiktighet! Använda den andra handen för att hålla sätet upprätt och förhindra att det faller ned och orsakar skada.
(Figur 24.25)

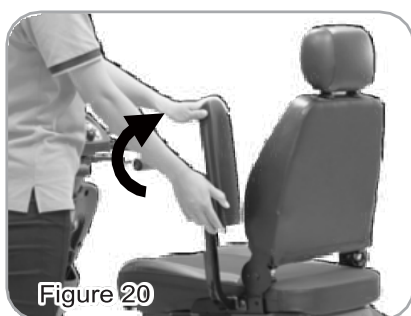


Figure 20



Figure 21

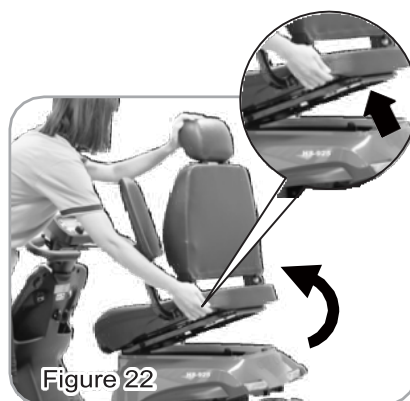


Figure 22



Figure 23

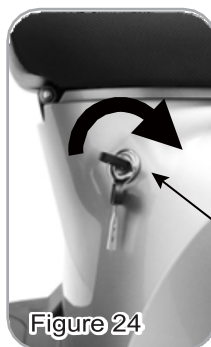



Figure 24



Figure 25

5-2 FRIHJUL (N-D-SPAK)

- När spaken är i läge D går det att köra promenadskotern. Den normala positionen är D. (Tillse att spaken är i läge D när skotern slås på eller parkeras.)
- När spaken är i neutralt läge (N) kan promenadskotern flyttas manuellt utan eldrivning. (Tillse att spaken är i neutralt läge (N) när du behöver förflytta skotern manuellt.)

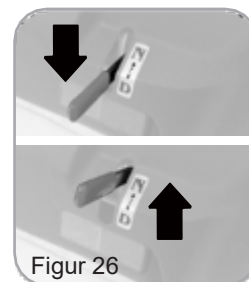

·Frihjulsdraft rekommenderas enbart på platta underlag. Stå aldrig på lutande underlag med fränkopplad motor.

- Sitt inte på promenadskotern vid inställning av N-D-spaken.
- Det går inte att köra skotern när spaken är i neutralt läge. Stäng av promenadskotern och för spaken till läge D innan du startar igen och kör iväg. (Figur 26)

5-3 KONTROLLSYSTEM FÖR SÄKER FART


- När man förflyttar skotern manuellt (i läge N) aktiveras kontrollsystemet för säker fart och skotern kommer automatiskt att sakta ned om farten är för hög.
- Sakta ned och se till att du har tillräckligt med plats för förflyttningen. Sväng inte kraftigt i hög fart för att minska risken att tippa över. (se punkt 10. Alternativ för tillval av fartreducering i svängar)

5-4 FASTA KROKAR

- För att garantera säkerhet under transport finns det fyra fast installerade förankringskrokar för fastsättning av skotern i andra fordon. (Figur 27)
- Promenadskotern ska vara i läge D under transport.
- Sitt inte på skotern under transport.



·Får inte bogseras av något fordon. Det kan leda till allvarliga skador på skotern.

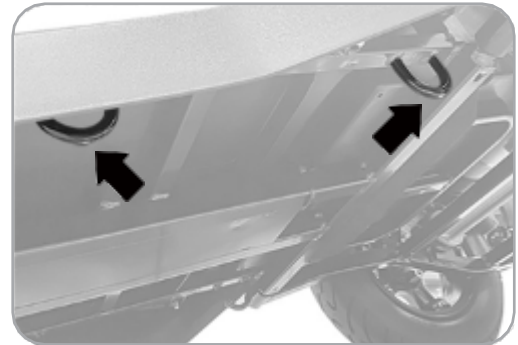

Figur 27

5-5 DEMONTERING AV PROMENADSKOTERN

Demontering av armstöd:


- Ta bort skruvarna för att demontera armstöden. (Figur 28)

Demontera stolen:


- Demontering: Öppna förvaringsutrymmet under sätet och be någon hjälpa till att lyfta sätet till dess skruvarna har tagits bort. (Se punkt 5-1 Handhavande - förvaringsutrymme under sätet). Använd hylsnyckel för att lossa skruvarna och demontera sätet. (Figur 29)
- Montering: Utför samma steg i motsatt ordning.

Demontering av förvaringsutrymmet under sätet


- Ta bort de tre skruvarna för att demontera förvaringsutrymmet. (Figur 30)
- Sätt tillbaka sätet och skruva fast de tre skruvarna för att montera sätet.

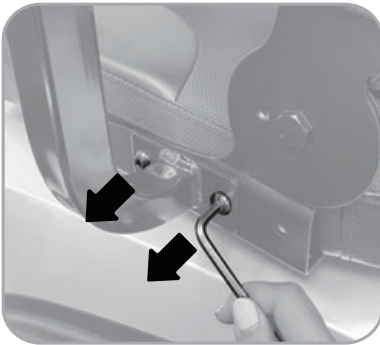

Figur 28

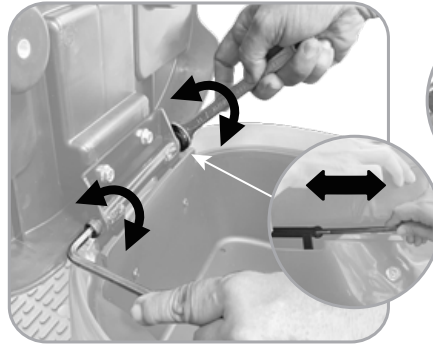

Figur 29

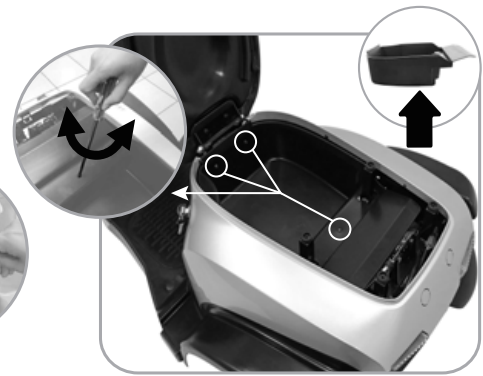

Figur 30



·Sätet är tungt. Demontering av sätet ska utföras av två personer för att undvika skador. Slå inte på skotern vid montering/demontering av skotern och kontrollera att skotern är avstängd samt att spaken är i läge D. Ändra inte eller modifiera skotern med icke tillåtna delar eller tillbehör.

Demontering av batterier:


- Öppna förvaringsutrymmet under sätet och demontera det. (Se punkt 5-1 Handhavande – Förvaringsutrymme under sätet & 5-5 Demontering av promenadskotern – demontering av förvaringsutrymmet under sätet) (Figur 31-32)
- Koppla bort anslutningskabeln till de två batterierna. (Figur 33)
- Lossa kardborrbanden och koppla bort batterikontakterna för att avlägsna batterierna. Använd alltid batteriets bärhandtag. (Figur 34-35)
- Utför samma steg i motsatt ordning för att montera batterierna.



Figur 31



Figur 32

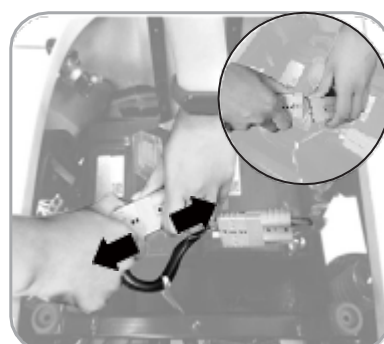


Figur 33



Figur 34



Figur 35

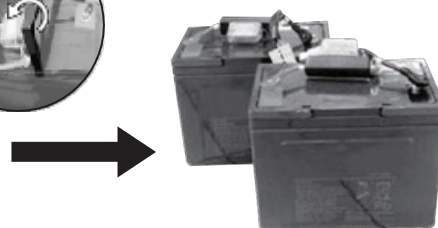

- Batterierna är tunga så var försiktig när du tar ut dem.
- Anslut inte batteriplinten [+] [-] till metallföremål då detta kan orsaka fara.
- Anslut röd kopplingsplint till rött och svart kopplingsplint till svart.
- Vid byte av batterier ska skruvar och kontakter tas bort och sedan sättas ihop i rätt ordning.
- Underhåll och reparationer får endast utföras av behörig tekniker eller auktoriserad återförsäljare.

6. BATTERILADDNING

6-1 HANTERING AV LADDAREN

Batterierna måste laddas innan promenadskotern används första gången och ska laddas efter varje användningstillfälle.


Skotern levereras med en batteriladdare.



·Notera att typen av laddare kan variera från land till land. Laddningsprocessen och lysdioderna kan skilja sig från anvisningarna nedan.

- Kontrollera laddarens bruksanvisning eller kontakta auktoriserad återförsäljare för mer information.
- Kontrollera att tändningsnyckeln är i läge OFF.
- Använd inte förlängningssladd för att ansluta laddaren.

1. Sätt i kabeln till batteriladdaren i laddningsuttaket på laddaren. Se figuren ovan för korrekt position. (Figur 36)
2. Koppla in andra änden av kabeln i ett vanligt vägguttag.
3. Slå på strömmen: Lysdioden (Power) lyser grönt när strömförsörjning etablerats. (G)
4. Laddningen påbörjas: Under laddning lyser lysdioden orange och när den växlar till grönt betyder det att batteriet är laddat. (F)
5. Beskrivning av lysdioder
 - LYSDIOD (POWER) - GRÖNT LJUS: Power on
 - LYSDIOD (CHARGE) (F) -
 - Blinkar GRÖNT: Normalt, väntar på anslutning av laddare.
 - Blinkar ORANGE: Förladdar.
 - Stadigt ORANGE: Laddar
 - Blinkar ORANGE GRÖNT: 80 % laddat.
 - Stadigt GRÖNT: Helt laddat
 - Blinkar RÖTT: Fel på laddare eller batteri. Avsluta laddningen.
6. Problemlösning – laddare
 - (A) Om lysdioden (POWER) inte lyser:
 - Kontrollera att den ingående spänningen (115V/230V) överensstämmer med angiven spänning.
 - Om lysdioden fortfarande är släckt ska batteriladdaren kontrolleras och repareras.
 - (B) Om lysdioden (CHARGE) inte lyser:
 - Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
 - När batteriet är helt laddat slocknar lysdioden (CHARGE).
 - Om lysdioden fortfarande är släckt kan batteriet vara defekt.
 - (C) Om ORANGE lysdiod börjar lysa GRÖNT:
 - Batteriet går inte att ladda. Kontrollera och kassera det vid behov.
 - (D) Om ORANGE lampa omedelbart börja lysa GRÖNT:
 - Kontrollera om batteriet är helt laddat. Om inte, kan batteriet vara defekt. Kontrollera och kassera det vid behov.

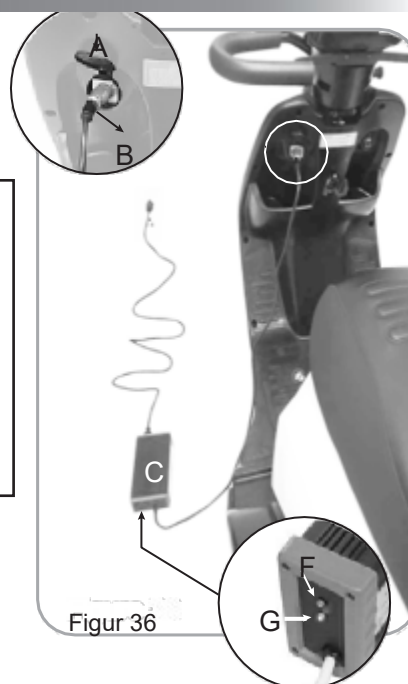

Erforderlig laddningstid varierar beroende på hur urladdade batterierna är. Batteriet tar ingen skada av att laddas för länge. De kan inte bli överladdade.

6-2 BATTERI & LADDARE

Batteri:

- Används endast för 12V blybatterier och inte för andra typer av batterier eller med annan spänning.
- Vrid inte om tändningsnyckeln när skotern laddas.
- Skotern använder blybatterier. Tillsätt inte elektrolyt.
- Ladda batterierna efter varje användningstillfälle. Använd endast batteriladdaren (under 8 ampere) som medföljer vid leverans av din promenadskoter.
- Om skotern inte ska användas under en tid måste batterierna laddas om minst var tredje månad. Kontrollera att batterierna är fulladdade och ladda dem på nytt innan du använder skotern.
- Batterierna uppnår max. effekt först när skotern har använts ett tag Och batterierna har laddats upp till tio gånger.
- Stäng inte av laddaren eller avbryt laddningscykeln förrän den är klar. (Dioden börjar lysa grönt)
- Minsta erforderliga laddningstid varierar upp till 15 timmar beroende på hur urladdade batterierna är. Överdriven eller för kort laddningstid kan förkorta batteriets livslängd.
- Laddning av skotern utanför intervallet 0–40°C kan påverka prestandan hos laddaren och batteriet.
- För längsta livslängd ska batterierna laddas regelbundet. Ladda batterierna innan batterinivån sjunker under 20 procent.
- Kontrollera batterierna var sjätte månad hos en auktoriserad återförsäljare oavsett hur ofta de används.

Laddare:

- Låt inte laddaren vara ansluten till skotern när laddaren är avstängd då detta kan skada batterierna.
- Inspektera batteriladdaren före varje användningstillfälle och kontrollera att kontakterna är torra och rena. Använd inte förlängningssladd för inkoppling av batteriladdaren.
- Kåpan på batteriladdaren kan bli het under laddning. Undvik kontakt med huden.



Batteriladdaren är försedd med en kylfläkt. Om fläkten inte verkar fungera korrekt ska laddaren stängas av omgående då den kan bli överhettad. Kontakta auktoriserad försäljare av din promenadskoter.

- Täck inte över laddaren under laddning. Håll utrymmet rent och väl ventilerat.
- Använd batteriladdaren i ett utrymme med god ventilation. Undvik rökning eftersom explosiva gaser kan uppstå under laddning av batterierna.
- Notera att batterifel orsakade av otillåtna underhållsingrepp, isärplockning, felaktig användning eller olyckshändelse inte täcks av tillverkarens garanti.

7.SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

7-1 DAGLIG KONTROLL

Kontrollera alltid skotern innan du kör iväg med den.

Punkt	Inspektion	Gör följande om inspektionen inte leder någon vart
N-D-spak	Säkerställ korrekt funktion.	Kontakta återförsäljaren.
Signalhorn	Säkerställ korrekt funktion.	Kontakta återförsäljaren.
Gasreglage	Dra i wigwag-reglaget för att testa promenadskoterns rörelser.	Kontakta återförsäljaren.
Elektromekanisk broms och nödhandbroms	Dra försiktigt i gas-reglaget och släpp det för att testa om bromsen fungerar. Om promenadskotern är utrustad med nödhandbroms ska även denna kontrolleras.	Kontakta återförsäljaren.
Batterimätare	Kontrollera att batterimätaren visas och om batterikapaciteten är låg.	• Kontakta återförsäljaren om batterimätaren inte fungerar. • Ladda batteriet omgående om batterinivån är låg.
Backspegel(-lar)	Kontrollera att delarna är rena och ordentligt fastsatta i promenadskotern utan att vippta.	• Torka av smuts med en fuktig trasa. • Dra åt skruven eller fästet för backspegeln(-larna).
Belysning	Kontrollera att alla lampor såsom strålkastare, baklyktor och blinkers fungerar som de ska.	Kontakta återförsäljaren.

7-2 VECKOKONTROLL

Punkt	Inspektion	Gör följande om inspektionen inte leder någon vart
Fartvred	Säkerställ korrekt funktion.	Kontakta återförsäljaren.
Armstöd	Kontrollera att delarna är rena och ordentligt fastsatta i promenadskotern utan att vippta. Dra åt rattens på skruven som håller fast armstödet.	Kontakta återförsäljaren.
Hjul/däck	Pumpa upp däck till korrekt tryck och kontrollera att 1. drivhjulen roterar utan att kränga. 2. däckens mönsterdjup inte understiger 0,5 mm 3. det inte finns några främmande föremål i däcken.	Kontakta återförsäljaren.
Motor	Säkerställ korrekt funktion.	Iaktta under körning Kontakta återförsäljaren.
Batteriladdare	Kontrollera att laddaren fungerar korrekt och att batterierna är laddade.	Kontakta återförsäljaren.

7-3 MÅNADSKONTROLL

Punkt	Inspektion	Gör följande om inspektionen inte leder någon vart
-------	------------	--

Stol/klädsel	Kontrollera om stolen rör sig samt om den är sliten.	Kontakta återförsäljaren.
Elektronik	Kontrollera att batterikablarna och kontakterna är ordentligt isatta i skotern.	Kontakta återförsäljaren.

7-4 RENGÖRING AV PROMENADSKOTERN

- Använd inga slipande eller frätande vätskor vid rengöring.
- Använd endast en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Använd inte vattenslang och håll inte vatten direkt på skotern då detta kan orsaka skador på elektroniken.

7-5 UNDERHÅLL

- Användaren ska inspektera promenadskotern regelbundet för att hålla den i kördugligt skick.
- Kontrollera att elkablarnas kontakter är korrekt anslutna.
- Underhåll och reparation av skotern ska utföras av auktoriserad återförsäljare.

Stolsstopning:

Använd endast en fuktig trasa och lite diskmedel för att torka av stolen. Använd inga slipande rengöringsmedel eftersom detta skadar sätet.

Ram/kaross:

- Promenadskoterns ram och kåpa kan torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inga abrasiva rengöringsmedel då detta kan skada lacken.
- Bilpolish kan användas för att hålla lacken och karossen i perfekt skick.

Förvaring:

- Förvara promenadskotern på ett torrt ställe. Om skotern inte ska användas under en längre period ska batteriplintarna kopplas bort.
- Förvara inte skotern där den utsätts för direkt värme, fukt, olja, syror, alkalier eller där ozon kan alstras eftersom detta förkortar skoterns/däckens livslängd.

Däck:

Användaren ska regelbundet inspektera att däcken inte är skadade eller onormalt slitna, att det inte finns några främmande partiklar på dem samt att mönsterdjupet är tillräckligt. Kontakta återförsäljare om däcken behöver bytas.

Fram- och bakhjul: Ø 370 x 90 mm (15") luftfyllda däck.

Kontrollera regelbundet att

- däcktrycket ligger på 30–35 psi och att
- mönsterdjupet inte understiger 0,5 mm.


Rekommenderade omgivningsförhållanden under förvaring:

Temperatur: -30°C – +50°C, Luftfuktighet: 25 %–85 %

Följ dessa enkla steg för att byta däck:

1. Stäng av skotern och ta ur tändningsnyckeln. Kontrollera att spaken är i läge D innan du lyfter promenadskotern.
2. Använd en hylsnyckel för att ta bort skruven till drivhjulet från hjulets nav. Dra av hjulet från axeln.
3. Skilj däck från fälgen.
4. Ta bort det gamla däck och byt ut det mot ett nytt.
5. Sätt tillbaka hjulet på axeln.
6. Placera drivhjulets mutter i centrumnavet och kontrollera att axeln och hjulet är i linje med varandra. Dra sedan åt muttern för att sätta hjulet på plats. (Vridmoment 300 ±30 kgf-cm)

Underhåll och reparationer av skotern ska utföras av auktoriserad återförsäljare.

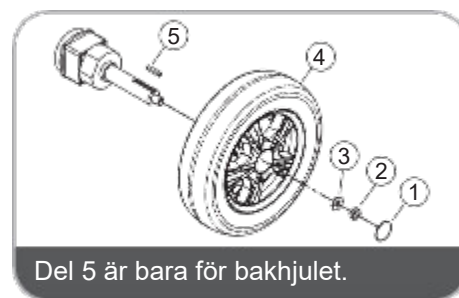

8. ÖVRIG INFORMATION

8-1 ÅTERVINNING & BORTSKAFFNING

- Utrustningens emballage ska återvinnas.
- Metalldelar återvinns som metall. Plastdelar kasseras i behållare för plast.
- Elektriska komponenter och kretskort återvinns som elektronik.
- Urladdade eller skadade batterier kan lämnas in till återförsäljaren av produkten.
- Batterierna ska bortskaffas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
- Vänd dig till kommunen för regler om lokal avfallshantering.

8-2 LIVSLÄNGD

Den beräknade livslängden för denna produkt är fem år förutsatt att den används i strikt överensstämmelse med avsedd användning enligt beskrivning i denna manual samt att alla underhålls- och servicekravs uppfylls. Den beräknade livslängden kan öka om produkten används varsamt och sköts på rätt sätt och att tekniska landvinningar inte leder till begränsningar av dess funktioner. Livslängden kan också minska avsevärt vid extrem eller felaktig användning. Att vi anger en beräknad livslängd för produkten innebär inte någon ytterligare garanti från vår sida.

9. FELSÖKNING

Nedan anges förslag om hur du kan lösa eventuella problem med din promenadskoter. Det finns en självdiagnosticerande varningslampa på kontrollpanelen. Kontrollera varningslampan genom att vrida om tändningsnyckeln och räkna hur många gånger lampan blinkar.



Figure 37

9-1 SKOTERN RÖR SIG INTE NÄR NYCKELN VRIDS OM

Punkt	Lösning
Kontrollera om strömförsörjningen är bortkopplad.	Slå på strömmen.
Kontrollera om N-D-spaken är i neutralt läge.	Växla till läge D (Drive). Stäng av strömmen och slå på den igen.
Kontrollera att batterikapaciteten är tillräcklig. (Batterimätaren visar en laddningsnivå på under 25 %.)	Ladda batteriet och pröva på nytt.
Kontrollera om batteriladdarens sladd fortfarande är ansluten till skotern.	Dra ut sladden till batteriladdaren.

9-2 FELKOD

Punkt	Beskrivning	Kontrollera följande
1	Låg batterinivå	Batterierna håller på att ladda ur. • Ladda batterierna.
2	Fel – låg batterinivå	Batterierna har laddat ur. • Ladda batterierna. • Kontrollera batterierna och tillhörande anslutningar och kablar.
3	För hög batterinivå	Batterispänningen är för hög. Detta kan inträffa om batteriet är överladdat och/eller om man kör nedför en lång backe. • Minska farten i nedförsbackar för att minimera risken för överladdning.
4	Överskriden max. effekt eller överhettning av kontrollenhet	Motorn har överskridit sin nominella max. effekt under för lång tid. • Skotern kan ha fått stopp. Stäng av kontrollenheten i några minuter och sätt sedan på den igen. • Motorn kan vara defekt. Kontrollera motorn och tillhörande anslutningar och kablar.
5	Parkeringsbroms	Antingen är knappen för parkeringsbromsen intryckt eller så är parkeringsbromsen defekt. • Kontrollera parkeringsbromsen och tillhörande anslutningar och kablar. • Kontrollera att tillhörande strömbrytare är i rätt läge.
6	Hämmad körförmåga	Antingen har en stoppfunktion aktiverats, laddaren fallerat eller så är spaken inte i neutralt läge. • Avhjälp stopporsaken (t.ex. uppfällt säte). • Koppla bort batteriladdaren. • Kontrollera att gasreglaget är i neutralt läge när kontrollenheten sätts på. • Gasreglaget kan behöva kalibreras på nytt.
7	Fartpotentiometer	Gasreglaget, fartpotentiometern (SRW) eller tillhörande kablar kan vara defekta. • Kontrollera gasreglaget och fartpotentiometern samt tillhörande anslutningar och kablar.
8	Motorspänning	Motorn eller tillhörande kablar är defekta. • Kontrollera motorn och tillhörande anslutningar och kablar.
9	Andra fel	Kontrollenheten kan ha ett internt fel. • Kontrollera alla anslutningar och kablar.

- Om varningslampan blinkar 1 / 2 / 4 / 5 gånger, se ovanstående för lösningar (stäng av och slå på igen eller ladda batteriet). Om inget av ovanstående löser problemet, kontakta auktoriserad återförsäljare.
- Om varningslampan blinkar 3 / 6 / 7 / 8 / 9 gånger, kontakta auktoriserad återförsäljare.

9-3 ANDRA PROBLEM

- DÄCK: Lågt däcktryck: pumpa upp däcken till 30–35 psi.
- Laddare: Under laddning växlar inte lampan till grönt ljus. Se punkt 6-1.

10. TILLVAL

Vi erbjuder tillvalen nedan för ökad funktionalitet för din promenadskoter. Kontakta auktoriserad återförsäljare för mer information.

Daytime belysning



USB-laddare



Mopedsäte



Packbox som ryggstöd med
skjutbart säte



Fartreducering i svängar



Vid sväng åt höger/vänster sänker promenadskotern, beroende på svängutrymmet, automatiskt farten vilket ökar säkerheten. (Gyrometer)

12V / 75Ah batteri



11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Total längd	1 590 mm
Total bredd	690 mm / 27,2"
Total höjd	1 275 mm / 50,2"
Framhjul	370 mm / 15"
Bakhjul	370 mm / 15"
Vikt med batterier	100 kg
Max. hastighet	15 km/h
Viktkapacitet	136 kg
Markfrigång	105 mm / 4,1"
Max. lutningsgrad	10 grader
Max. höjd trottoarkant	100 mm / 3,9"
Vändradie	1 800 mm / 70,9"
Upphängning	Fram & bak
Broms	Handbroms, elektromekanisk
Stolstyp	Skotersäte med justerbara armstöd
Stolsbredd	456 mm
Motorstorlek	700W, 4150 v/min
Batteristorlek	(2) 12 V, 50Ah
Batterivikt	30,5 kg
Max. räckvidd	35 km
Batteriladdare	5A Off Board
Elektronik	On/off-knapp, tändningsnyckel, indikator för batterinivå, fartkontroll

*Kan ändras utan föregående meddelande. (Rev. 1,2 2020/12/21)

12.Service

Årlig regelbunden service skall utföras av auktoriserad serviceverkstad. Verkstad utför och dokumenterar alla åtgärder, stämplat och signerar.

Inköpsdatum: _____				
Modell: _____				
Serie nr: _____				
	1a	2a	3e	4e
Kontroll (K) Smörjning (S) Byt (B)				
Samtliga lås (S)				
Hjul, däcktryck (K)				
Sits (S)				
Styrning (K,S)				
Elektromagnetisk broms (K)				
Batterier (K)				
Nödbroms funktion (K)				
Handbroms (K)				
Programversion (K) & uppdateringar				
Körtest (K)				

Verkstad bockar och stämplat i rutan.

Leveransservice Datum: _____	ÅF stämpel & signatur
1:a service Datum: _____	ÅF stämpel & signatur
2:a service Datum: _____	ÅF stämpel & signatur
3:a service Datum: _____	ÅF stämpel & signatur
4:a service Datum: _____	ÅF stämpel & signatur

Noteringar

13. Garantivillkor

Alla garantier följer fordonet. Garantins startdatum är inköpsdatum på kvitto.

1 ÅRS GARANTI på fordon gäller då följande grundkriterier uppfyllts:

- Leveransservice ska vara utförd enligt anvisning av auktoriserad återförsäljare.
- Underhållservice skall vara utförd av fackman i enlighet med de anvisningar och protokoll som utfärdats av Dealy Sweden AB vad gäller servicepunkter och intervaller.
- Originaldelar ska alltid användas.
- Rätt ifylld servicebok ska alltid uppvisas. Även handlingar som styrker innehållet, till exempel kvitton och protokoll, ska vid begäran kunna uppvisas.

1 ÅRS GARANTI gäller inte:

- Om annat angivits i instruktionsboken, produktblad/folder eller på annat motsvarande sätt.
- Om fordonet trimmats (även avstrykning, modifiering, m.m. klassas som trimning).
- Om service inte sköts enligt villkoren i serviceboken.
- Om fordonet reparerats med delar som inte är originaldelar och dessa kan anses vara orsak till felet.
- Om fordonet används kommersiellt.

Ansvarig för garantin är i första hand den återförsäljare som sålt fordonet. Återförsäljaren ansvarar alltid för fel som uppkommer på grund av att leverans service inte gjorts enligt föreskrifter.

Slitagedetaljer faller inte under garantiåtagandet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

- Batteri
- Bromsklossar/-backar samt bromsskivor (om så finns)
- Drivremmar (om så finns)
- Glödlampor och säkringar
- Däck och innerslangar
- Oljor, batterivatten, bromsvätska (om så finns)

Tillägg som inte ingår i garantin är:

- Åverkan på ytor på grund av felaktig eller oförsiktig hantering vid tvätt, uppackning, service, transport eller förvaring av fordonet.
- Skador som uppkommit på grund av att fordonet använts för tävling eller motorsport i annan form.
- Skador som uppkommit på grund av modifikation av fordonet.
- Skador som uppkommit på grund av yttre påverkan.
- Skador som uppkommit på grund av force majeure.
- Normal åldring av komponenter, t. ex. avmattnings i färg eller metall.
- Skador som uppkommit på grund av bristande eller felaktig underhåll.
- Extramonterad utrustning, t. ex. lås,

Din återförsäljare:

*Promenadskoter marknadsförs av Dealy Sweden AB - En del av Olle Olsson Bolagen AB
Post: Box 57 ,751 03 Uppsala Tel: 018-17 05 90
info@promenadskoter.se www.promenadskoter.se*